


Melgisorb® Ag

ERITTÄIN IMUKYKYINEN ANTIMIKROBINEN ALGINAATTISIDOS

- Erinomainen imukyky paljon erittäville syville haavoille
- Tarjoaa pitkäkestoisen antimikrobisen tehon
- Vahva kuitulujuus mahdollistaa poistamisen yhtenä kappaleena

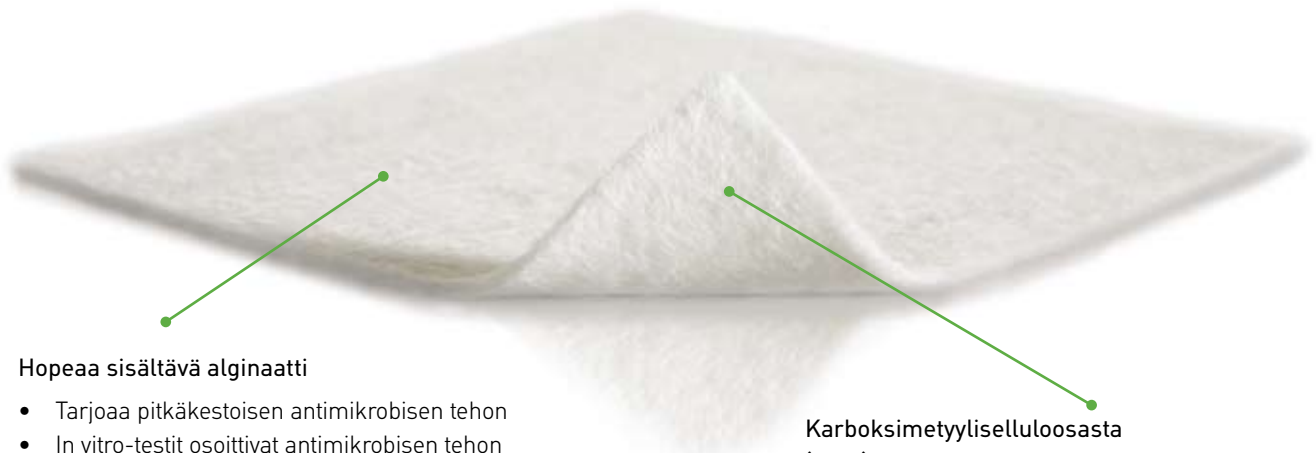


Hopeaa sisältävä alginaatti

- Tarjoaa pitkäkestoisen antimikrobisen tehon
- In vitro-testit osoittivat antimikrobisen tehon neljästä tunnista jopa 21 päivään


Karboksimetyyliselluloosasta (CMC) valmistettu alginaatti

- Sopii runsaasti erittäville haavoille
- Suunniteltu pinnallisille ja syville haavoille
- Mahdollistaa tuotteen poistamisen yhtenä kappaleena


Kuinka Melgisorb Ag:ta käytetään

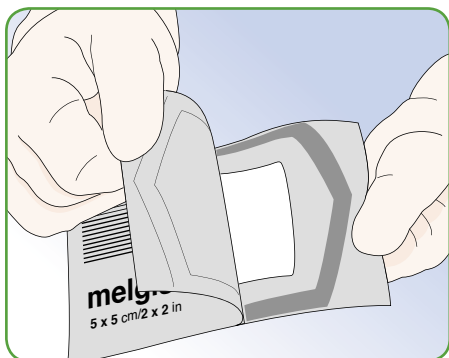

Poista tarvittaessa kuollut kudos ja huuhtele haava normaalien toimenpideohjeiden mukaisesti. Valitse Melgisorb Ag -sidos, joka on hieman haavaa suurempi. Leikkaa (käyttäen steriilejä saksia) tai taita sidos haavaan sopivaksi.

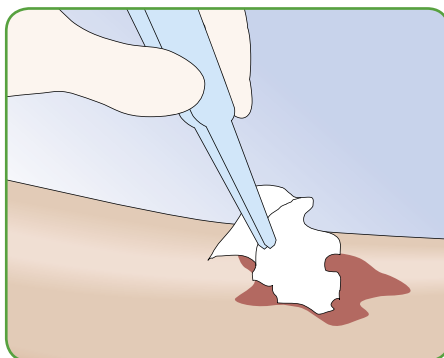

Aseta suoraan haavapohjaan. Täytä syvät haavat kevyesti varmistuen, ettei sidos kerrostu haavan reunoihin.

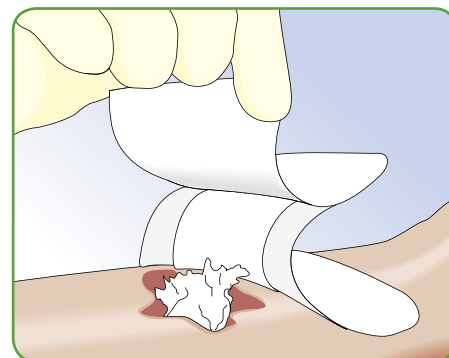

Peitä ja varmista Melgisorb Ag hengittävällä sekundäärisellä sidoksella.

Käyttöalueet

Melgisorb Ag -sidoksen käyttöalueita ovat kaikki haavat, pinnallisista syviin, joiden eritteen määrä vaihtelee kohtalaisesta voimakkaaseen, kuten:

- leikkauksenjälkeiset haavat
- traumahaavat (ruhjeet ja viillot)
- säärihaavat
- painehaavat
- diabeettiset jalka- ja säärihaavat
- ihosiirteet ja ihonotokohdat
- pinnalliset ja toisen asteen palovammat

Tätä tuotetta voidaan myös käyttää kompressiosidosten alla. Koska tuote sisältää alginaattia, se voi auttaa pinnallisten haavojen vähäisen verenvuodon hallinnassa. Melgisorb Ag -sidosta voidaan käyttää tulehtuneille haavoille tai haavoille, joilla on kasvanut infektioriski. Käyttö ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisen lääketieteellisessä valvonnassa. Melgisorb Ag on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön.

Huomioitavaa

Tuote voi olla paikoillaan korkeintaan seitsemän päivää. Sidosten vaihtoväli riippuu haavan kunnosta ja eritteen määrästä. Aluksi sopiva sidoksen vaihtoväli saattaa olla 24 tuntia. Jos haava vaikuttaa kuivalta, kostuta sidosta tavallisella steriilillä suolaliuoksella ennen irroitusta. Poista sidos hellävaraisesti haavapohjasta. Huuhtele haava tarvittaessa normaalien toimenpideohjeiden mukaisesti ennen uuden sidoksen kiinnittämistä.

Kontraindikaatiot

Melgisorb Ag ei sovellu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- potilaat, joilla tiedetään olevan yliherkkyyttä hopealle
- runsaan verenvuodon tyrehtyttäminen
- kuivat tai vain vähän erittävät haavat

Varoitukset

- Sidos saattaa tarttua kiinni, jos sitä käytetään kuiville tai hyvin vähän erittävillä haavoilla. Jos sidos tarttuu eikä sen irrotus ole helppoa, kostuta sitä steriilillä suolaliuoksella ennen irroitusta.
- Sidoksen suorituskyky saattaa heiketä, jos käytetään liikaa vaseliinipohjaisia voiteita.
- Vältä kontaktia elektrodien tai johtavien geelien kanssa, esimerkiksi elektrokardiografia (EKG)- ja elektroenkefalografia (EEG) -tutkimusten aikana.
- Sidos on poistettava ennen potilaan magneettikuvaus (MRI) -tutkimusta.
- Jos haavassa on kliininen tulehdus, pinnallinen hopea ei korvaa antibioottihoitoa tai muuta asiaankuuluvaa infektihoitoa



Valikoima

Tuotenumero	Koko cm	Pakkauskoko osastorasia/kuljetuspakk.
256050	5 x 5	10/100
256100	10 x 10	10/100
256150	15 x 15	10/100
256600	3 x 44	10/100

Steriilisti yksittäispakattu