

Kliniderm Foam Silicone silikonivaahantosidos



Moderni imevä polyuretaanivaahtosidos, jossa pehmeä silikoninen haavakontaktipinta.


TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Silikonikiinnitteinen, silikonikiinnitys koko sidoksen alueella
- Sekä ohut että standardiversio, ohut vähän tai kohtalaisesti erittäville haavoille, standardiversio kohtalaisesti tai runsaasti erittäville haavoille
- Mukautuu joustavasti kehon muotoon ja liikkeisiin ja pysyy hyvin paikoillaan
- Reunallista (border) versiota voi käyttää myös suihkussa, sidoksen pinta on vedenkestävä
- Minimoi kipua ja vaurioita haavalle sidosta vaihdettaessa
- Suojaa ympäröivää ihoa
- Helppo sidoksen asettaminen ja uudelleen asettaminen haavan tarkistuksen jälkeen
- Mukava potilaalle
- Edistää kostea haavanhoitoa

KLINIDERM-SILIKONIVAHAHTOSIDOKSET SOVELTUVAT MONENLAISILLE HAAVOILLE

- Painehaavat
- Diabetekseen liittyvät haavat
- Post operatiiviset haavat
- Ihorikot ja muut traumaattiset haavat

Tuotetta voidaan käyttää myös infektoituneisiin haavoihin mikäli infektiota samalla hoidetaan muulla tavoin hyvää haavanhoitotapaa noudattaen.

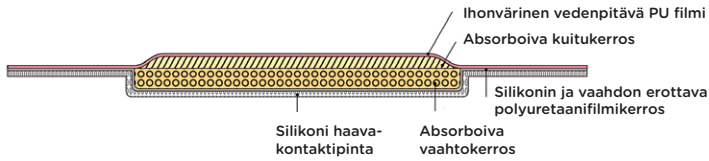

TUOTE KOOSTUU KOLMESTA PÄÄKERROKSESTA

Silikoni haavakontaktipinta:

Haavakontaktipinnan silikonin avulla sidosta muotoutuu ihon epätasaisuuksiin. Toisin kuin akryylipohjaiset liimat, silikonin liimaava vaikutus ei tehostu ajan myötä. Tämän ansiosta tuote soveltuu erityisesti potilaille joilla on herkkä iho. Kliniderm-silikonahaavasidos vähentää myös kipua haavasidosta vaihdettaessa ja soveltuu siitä syystä potilaille, joiden sidosta tulee vaihtaa usein. Tuotteen silikonikerros on eristetty polyuretaanivaahtokerroksesta ohuella polyuretaanifilmillä.

Polyuretaanivaahtokerros:

Haavasidoksen haavaeritteen hallintakykyä on parannettu optimaalisella polyuretaanifilmillä vesihöyryn läpäisyllä (MVTR) sekä vaahtokerroksen absorboinnilla. Polyuretaanivaahtokerros sidoksen keskellä lukitsee haavaeritteen itseensä ja samalla estää haavapohjaa kuivumasta sekä ympäröivää ihoa maseroitumasta. Sidoksen nesteinhallinnan kokonaiskapasiteetti on 10,7 g/10 cm²/24 h/37 °C mikä on verrattavissa muihin vastaaviin tuotteisiin markkinoilla. Sidosta voidaan käyttää myös kompressiosidoksen alla jolloin absorptio on 6,5 g/10 cm²/24 h (40 mmHg).

Kosteuden ylläpitokerros:

Haavasidoksen polyuretaanivaahtokerros on päällystetty vesihöyryä läpäisevällä polyuretaanikalvolla, joka toimii suojana mikrobeja sekä ulkopuolelta tulevia nesteitä vastaan. Kalvon vesihöyryn läpäisykyky ylläpitää kosteutta haavassa ja lisää sidoksen käyttöikää haavalla.

KLINIDERM FOAM SILIKONIVAAHOTOSIDOS

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkaus-koko
Ilman reunusta			
1006509	40514823	5x5 cm	5 kpl
1006510	40514824	10x10 cm	5 kpl
1006511	40514825	15x15 cm	5 kpl
1006512	40514826	10x20 cm	5 kpl
1006513	40514827	20x20 cm	5 kpl
Kantapääsidos			
1006689	40514835	10 x 17,5 cm	5 kpl
Reunuksella			
1006502	40514828	7,5x7,5 cm	5 kpl
1006503	40514829	10x10 cm	5 kpl
1006504	40514830	12,5x12,5 cm	5 kpl
1006505	40514831	15x15 cm	5 kpl
1006506	40514832	10x20 cm	5 kpl
1006507	40514833	10x30 cm	5 kpl
1006508	40514834	15x20 cm	5 kpl
Sacrum-sidos			
1006715	40514839	15 x 15 cm	5 kpl
1006514	40514838	18 x 18 cm	5 kpl
1006515	40514837	22,5 x 22,5 cm	5 kpl

KLINIDERM FOAM SILIKONIVAAHOTOSIDOS OHUT (LITE)

Mediğin tuotenro	Valmistajan tuotenro	Koko	Pakkaus-koko
Ilman reunusta			
1006784	40514810	6x8 cm	5 kpl
1006785	40514811	10x10 cm	5 kpl
1006786	40514812	15x15 cm	5 kpl
1007271	40514813	20 x 50 cm	4 kpl
Reunuksella			
1006818	40514814	4x5 cm	10 kpl
1006814	40514815	5x12,5 cm	5 kpl
1006815	40514816	7,5x7,5 cm	5 kpl
1006816	40514817	10x10 cm	5 kpl
1006817	40514818	15x15 cm	5 kpl

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

