



# FLOCATH QUICK

LIUKKAAMPI KUIN KOSKAAN AIEMMIN

# FLOCATH QUICK – TEHOKAS JA TURVALLINEN

## HYGIEENINEN KATETRIN SUOJUS

Katetri voidaan asettaa paikalleen turvallisesti ja hygieenisesti koskematta siihen suoraan. Sisäänniennin jälkeen suojuksen voidaan työntää taakse, jolloin sitä voidaan käyttää katetrin jatkeena.

## HYDROFIILINEN PINNOITE

Ainutlaatuinen pinnoite takaa erinomaiset liukumisominaisuudet.

## PAKKAUKSEN PYÖREÄ AUKKO

Pakkauksen avaaminen ei vaadi sorminäppäryyttä. Katetripakkaus voidaan ripustaa roikkumaan aukosta.

## TARRANAUHA

Uudessa, helposti irrotettavassa tarrassa on kieleke, jolla katetri voidaan kiinnittää sopivaan pintaan. Näin saadaan molemmat kädet vapaaksi tarvittaessa.

## INTEGROITU STERIILI SUOLALIUOSPUSSI

Steriili suolaliuos, joka muodostaa katetriin hydrofiilisen pinnoitteen, on käytettävissä kaikissa tilanteissa.



## FLOCATH QUICK KOLMINKERTAISESTI PAREMPI:


- kolme kertaa pienempi kitka, silkkinen, pehmeästi liikkuva pinta ja liukkaampi kuin koskaan aiemmin\*
- kolme kertaa mukavampi käyttää koska mahdollistaa pidemmän (10-15 minuuttia) katetrointi ajan

\* Kitkaominaisuuksien mittaaminen on suoritettu Ruotsin kansallisen testaus- ja tutkimuslaitoksen (SP:n) mittaamenetelmällä

### TAVOITTELEMME AINA PARHAITA MAHDOLLISIA TULOKSIA

Parempi liukavuus, pidempi katetrointi-aika sekä minimoitu virtsaputken vaurioitumisen ja sairaalainfektion riski katetrin suojuksen ansiosta. Näiden huippuominaisuuksien lisäksi katetrin käsittely on helppoa, mikä takaa parhaan mahdollisen käyttömukavuuden.

*Kehittämämme hydrofiilisen pinnoitteen pohjana on PVP (polyvinyyli-pyrrolidoni), joka takaa erinomaiset liukuominaisuudet, nopean ja tasaisen kosteuteksen, erittäin hyvän kulutuksenkeston, kudosturvallisuuden sekä entistä paremman käyttöturvallisuuden.*

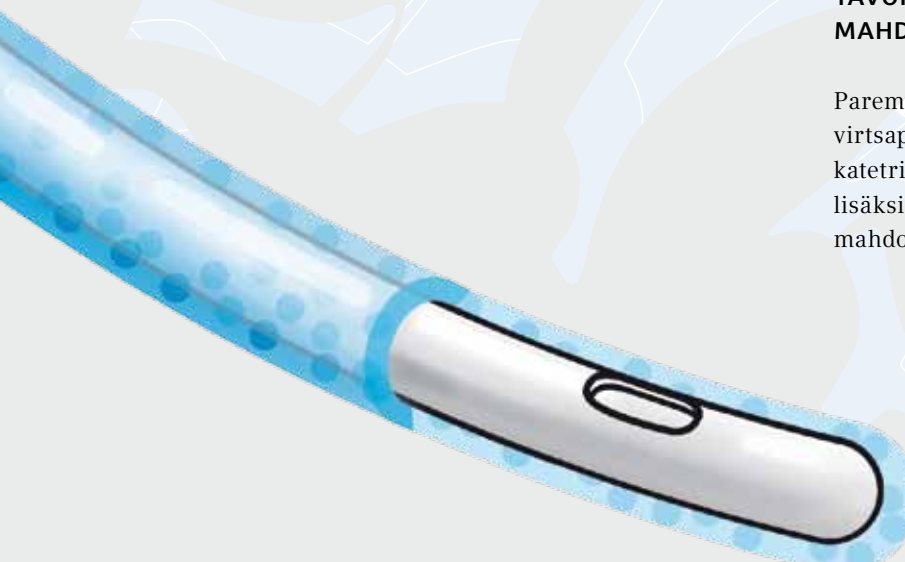

# PARAS MAHDOLLINEN KÄYTTÖMUKAVUUS

Toistokatetrointi on aina ollut toimintamme ydinaluetta, koska sillä pystytään parantamaan potilaan elämänlaatua: liikkuvuutta, joustavuutta ja integroitumista. Pyrimme aina tarjoamaan parhaita mahdollisia tuotteita edistyksellisten tekniikoiden avulla. Yksi tuotekehityksemme tuloksista on FLOCATH quick -katetri.

## TEHOKAS JA TURVALLINEN

FLOCATH quick on käyttövalmis, hydrofiilisesti pinnoitettu toistokatetri, jonka liukuominaisuudet ovat erinomaiset. FLOCATH quick -katetri on käytössä erittäin joustava, ja sitä käytettäessä toistokatetrointi on mahdollisimman helppoa, miellyttävää ja huomaamatonta.

Pakkaus sisältää steriilin suolaliuospussin, jolla katetrin hydrofiilinen pinnoite aktivoidaan. Katetrin suojuksen avulla sisäänvienti onnistuu koskematta itse katetriin. Sen avulla katetria voidaan myös jatkaa suppilo-osasta virtsarakon tyhjennyksen aikana.

## HELPPO KULJETTAA

FLOCATH quick on erittäin pienikokoinen ja sitä voidaan kuljettaa kätevästi vaikka housujen taskussa.



## FLOCATH QUICK -KATETRIN TILAUSTIEDOT

TUOTENRO	HALKAISIJA	PITUUS	MÄÄRÄ	
85 12 41	Kan. 8–20	40 cm	30	FLOCATH quick -katetreja on saatavana <b>DEHP-vapaasta PVC:stä</b> (di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti) valmistettuna
85 12 21	Kan. 8–20	20 cm	30	


ILMOITA TILAUKSEN YHTEYDESSÄ TUOTENUMERO JA KOKO.

# FLOCATH QUICK – MAHDOLLISIMMAN HELPPO KÄYTTÄÄ


**TURVALLINEN, HUOMAAMATON  
JA 30 SEKUNNISSA KÄYTTÖVALMIS**




*Pese tai desinfioi kätesi  
aina ennen katetrin käyttöä  
ja sen jälkeen.*

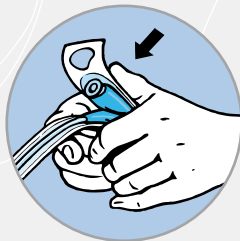


*Taita ja purista steriiliä  
suolaliuospussia. Älä avaa  
pussia. Neste vapautuu  
pakkaukseen.*

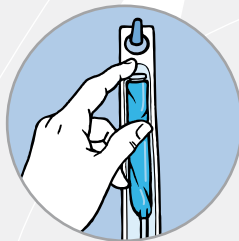


*Ripusta pakkaus siinä olevasta aukosta tai kiinnitä  
se haluttuun pintaan tarralla.*

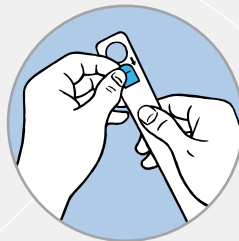


*Odota 30 sekuntia,  
jotta pinnoite aktivoituu.*

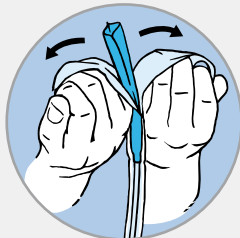


*Avaa pakkaus noin 10 cm:n  
matkalta ja ota katetri pois  
pakkauksesta suojuksesta  
kiinni pitäen.*

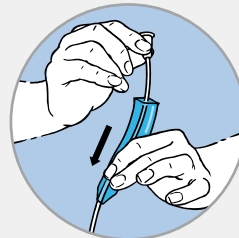

*Pidä kiinni katetrin  
suppilosta ja liu'uta suojusta  
katetrin kärkeä kohti.  
Suojus liukuu helposti  
katetria pitkin.*

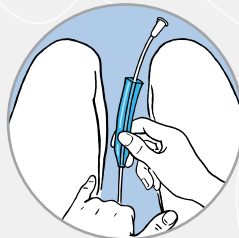

*Pidä kiinni katetrin  
suojuksesta ja vie katetri  
virtsarakkoon.*

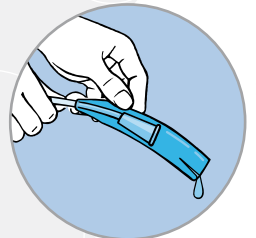

*Katetrin suojus voidaan vetää  
takaisin suppilon päälle,  
jolloin se toimii katetrin  
jatkeena virtsarakon  
tyhjennyksen aikana.*

Pyrimme parantamaan potilasturvallisuutta tarjoamalla kattavan valikoiman huippulaadukkaita, vähemmän invasiivisia tuotteita, joiden avulla voidaan vähentää infektoita ja parantaa käyttömukavuutta. Käytämme tehokkaita, käytännössä parhaaksi todettuja tekniikoita ja pyrimme tarjoamaan potilaan kannalta parhaita mahdollisia tuloksia.

**A TELEFLEX MEDICAL INFECTION PREVENTION INITIATIVE**



**TELEFLEX MEDICALIN EUROOPAN PÄÄKONTTORI, IRLANTI**

TELEFLEX MEDICAL EUROPE LTD.

IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath

Puhelinnumero: +353 (0)9 06 46 08 00,

sähköpostiosoite: orders.intl@teleflexmedical.com

**ALANKOMAAT TELEFLEX MEDICAL B.V., 1213 PE Hilversum**

Puhelinnumero: +31 (0) 88-002 15 00,

sähköpostiosoite: info.nl@teleflexmedical.com

**BELGIA TELEFLEX MEDICAL, 1932 Sint-Stevens-Woluwe**

Puhelinnumero: +32 (0)2 333 24 60,

sähköpostiosoite: info.be@teleflexmedical.com

**ETELÄ-AFRIKKA TELEFLEX MEDICAL (Pty) Ltd., P.O. Box 1716, Kelvin 2054**

Puhelinnumero: +27 (0)11 807 4887,

sähköpostiosoite: assist.africa@teleflexmedical.com

**ESPANJA TELEFLEX MEDICAL IBERIA, S.A., 28806 Alcalá de Henares (Madrid)**

Puhelinnumero: +34 918 300 451, sähköpostiosoite: info.es@teleflexmedical.com

**ISO-BRITANNIA TELEFLEX MEDICAL, High Wycombe, Bucks. HP12 3ST**

Puhelinnumero: +44 (0)1494 53 27 61,

sähköpostiosoite: info.uk@teleflexmedical.com

**ITALIA TELEFLEX MEDICAL S. r. l., 20039 Varedo (MB)**

Puhelinnumero: +39 0362 58911, sähköpostiosoite: info.it@teleflexmedical.com

**ITÄVALTA RÜSCH AUSTRIA Gesellschaft m.b.H., 1090 Wien**

Puhelinnumero: +43 (0)1 402 47 72,

sähköpostiosoite: rueschaustria@teleflexmedical.com

**PORTUGALI ARROW IBÉRIA, S.A., Rua Diamantina, 5, 4350-145 Porto**

Puhelinnumero: +351 22 541 90 85

**RANSKA TELEFLEX MEDICAL SAS, 31460 Le Faget**

Puhelinnumero: +33 (0)5 62 18 79 40,

sähköpostiosoite: info.teleflexmedical.france@teleflexmedical.com

**SLOVAKIA ARROW SLOVENSKO PIESTANY s.r.o., 92101 Piestany**

Puhelinnumero: +421 (0)3377 254 28, sähköpostiosoite: arrow@arrow.sk

**SVEITSI TELEFLEX MEDICAL GmbH, 3123 Belp**

Puhelinnumero: +41 (0)31 818 40 90,

sähköpostiosoite: switzerland@teleflexmedical.com

**TŠEKKI ARROW CZECH, Hradec Kralove 500 04**

Puhelinnumero: +420 (0)495 759 111

**UNKARI ARROW HUNGARY, 1054 Budapest**

Puhelinnumero: +36 (0)1 475 13 60

**Lisätietoja:**

**www.teleflexmedical.eu**

940303 - 0000FI - REV A - MC / SF - 03 10 01.5



**Mediq Suomi Oy**

Luomanportti 3, PL 115

02201 Espoo, puh. 020 112 1500

www.mediq.fi