



VeriFine Dual[®] -turvakynäneulat

TURVALLISUUS

- Neulan pistopään suojamekanismi lukittuu automaattisesti kun neula vedetään pois pistopaikasta.
- Neulan kynänpuoleisen pään suojamekanismi lukittuu, kun neula kierretään irti kynästä.
- Neula on nähtävissä ennen pistosta, mikä mahdollistaa helpon neulan valmistelun mm. insuliinivirtauksen testaaminen.



KÄYTETTÄVYYS

- Neulan pinnan silikonointi yhdessä terävän 3-viisteisen neulahionnan kanssa vähentää pistoksesta aiheutuvaa ihoärsytystä.
- Pistokulma voidaan valita.
- Voidaan käyttää useimmissa tavallisimmin käytössä olevissa kynäjärjestelmissä mm. Sanofi Aventis, Lilly, Novo Nordisk, Owen Mumford, Berlin Chemie.





Mediqin tuotenro	Neulan koko	Pakkauskoko	Valmistajan tuotenro
DUAL-TURVAKYNÄNEULAT ISO 11608-2, ISO 9626, ISO 23908			
10020310	30 G x 5 mm	100 kpl	DPN-30-5
10020311	30 G x 8 mm	100 kpl	DPN-30-8








KÄYTTÖ

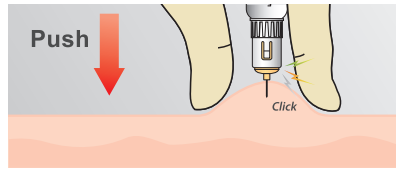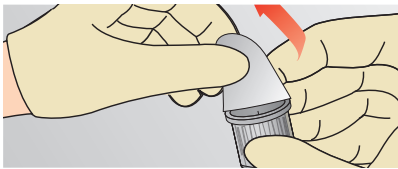


Ennen pistosta

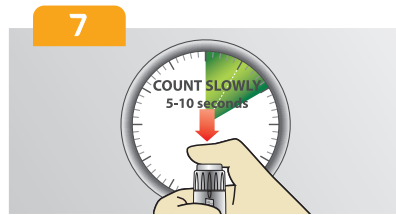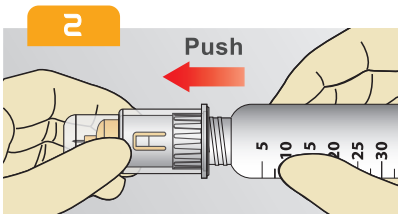

Piston jälkeen

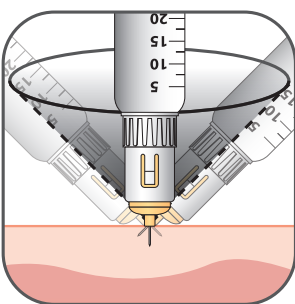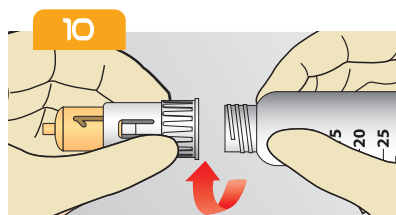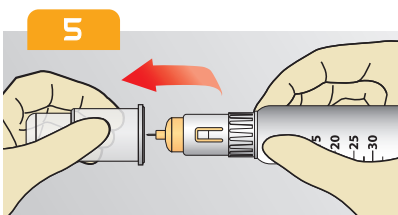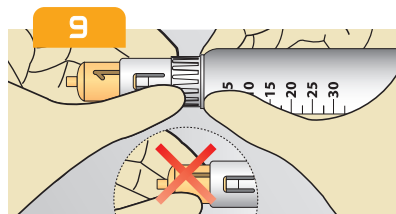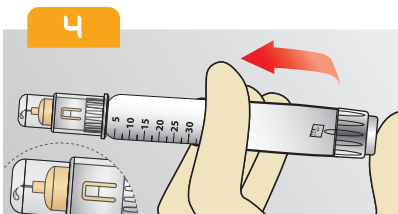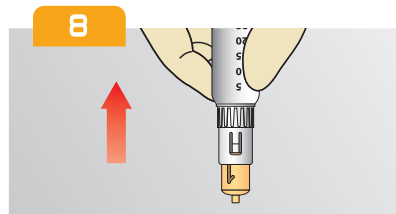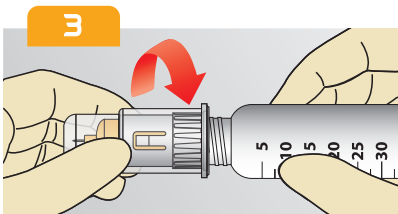

Pistokulma voidaan valita

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.  0197



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



10/2023