



**Kehitetty löytämään.
HEINE DELTA 30 PRO
-dermatoskooppi.**

Dermatoskopia ei ole koskaan ollut näin PRO.

Olemme kehittäneet ideoitamme dermatoskooppiemme parissa päivästä toiseen noin 12 418 päivän ajan. Suunnitellen, kokeillen, hyläten ja parantaen. Yhä uudelleen ja uudelleen. Kun keksimme maailman ensimmäisen dermatoskoopin vuonna 1989, tavoitteenamme oli kehittää laite, joka maksimoi diagnoosin tarkkuuden. Emme ole lopettaneet kehitystyötä. HEINE DELTA 30 PRO on kaiken kovan työmme tulos.

MERKITTÄVÄT PARANNUKSET.

Pienet yksityiskohdat merkitsevät paljon ihon tarkasteluissa. Siksi olemme uudelleenjärjestäneet LEDHQ:n uudessa HEINE DELTA 30 PRO:ssa. Näin valo tavoittaa ihon syvemmät kerrokset – antaen erittäin elävän vaikutelman vaurioista, samanlaisen kuin 3D-kuva.



Visualisointi perinteisellä dermatoskoopilla



Visualisointi uudella HEINE DELTA 30 PRO -dermatoskoopilla





HO 10x Magnifier

P


⏻

C


Uutta | Vaihda värilämpötilaa. Älä katselutottumuksiasi.

HEINE colorSHIFT.


HEINE colorSHIFT -toiminto on aidosti maailman ensimmäinen. Lämpimästä valkoisesta aina sinertävään valkoiseen se mahdollistaa värilämpötilan helpon säädön neljällä asetuksella mukautuakseen omiin katselutapoihisi. Napinpainallus riittää.

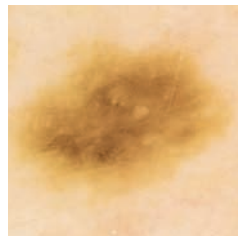


Lämmin valkoinen

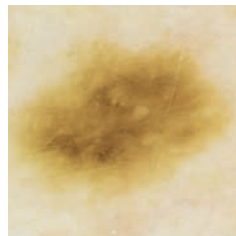

Neutraali valkoinen

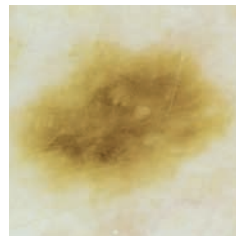

Kylmä valkoinen

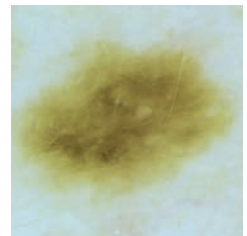

Sinertävä valkoinen

DIAGNOOSI – ETÄISYYDESTÄ RIIPPUMATTA.

Olitpa sitten työskennellessäsi lähellä tai hieman kauempana, HEINE DELTA 30 PRO:lla on tarkat optiikat, jotka pitävät kuvan terävänä ja kristallinkirkkaana koko ajan. Instrumentin kulmassa oleva ergonominen kädensija estää kätesi kosketuksen suoraan potilaan ihoon.

Uutta | Työskentelyrengas HEINE diSTANCE.

PYSYVÄN ETÄISYYDEN YLLÄPITÄMINEN SUURENNUSKUVAN ALLA.

Työskentelyrengas mahdollistaa ihomuutoksen tutkimisen suurennoksella ilman suoraa ihokontaktia.

Työskentelyrengas mahdollistaa ihomuutosten tutkimisen suurennuksen alla ilman kosketusta. Etäisyys pysyy aina vakiona, instrumentteja voidaan käyttää sivuilla olevista aukoista, ihomuutoksia voidaan merkitä, vierasesineitä voidaan poistaa ja paljon muuta. Dermatoskooppi ei ole suorassa kosketuksessa potilaan ihoon.



Kun pienillä asioilla on suuri merkitys.

KYTKINTOIMINTO.

Kyky erottaa tummat ja valkoiset rakenteet ja kuviot liittyy kaikki valoon polarisaatiossa. Kytkin-toiminto tekee siirtymisen polarisoidun ja ei-polarisoidun valon välillä erittäin helpoksi ja varmistaa tarkemman näkymän potilaaseesi.

DOKUMENTAATIOMAHDOLLISUUS

Uusi DELTA 30 PRO mahdollistaa digitaalisten kuvien ottamisen suurimmalla osalla saatavilla olevia älypuhelimia käyttäen HEINE:n yleissovittinta. Käyttämällä sitä yhdessä HEINE DERManager* -ohjelman kanssa voit helposti luoda, hallita ja kronologisesti dokumentoida kuvia tai pyytää tarvittaessa toista mielipidettä.

*Kaikki tiedot säilytetään palvelimilla Saksassa Euroopan unionin tiukan yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) mukaisesti. Joten ainoa henkilö, joka voi seurata tietojasi, olet sinä. Ja vain sinä.

DELTA 30 PRO kontaktilevyllä ja asteikolla, E4-USBC-virtalähde johdon kanssa, laukku	K-235.28.305
DELTA 30 PRO -paketti kontaktilevyllä ja asteikolla, pieni kontaktilevy, E4-USBC-virtalähde johdon kanssa, pöytälatausasema, yleissovitin älypuhelimelle, laukku	K-236.28.306
HEINE diSTANCE -työskentelyrengas	K-000.34.103

Lisätietoja muista tuotteista ja lisävarusteista löytyy osoitteesta www.heine.com

Quality made in Germany.

Me elämme ja hengitämme laatua. Kaikessa mitä teemme. Jokainen tuote, jonka valmistamme. Jokainen linssi, jonka hiomme. Jokainen ruuvi, jonka kiristämme. Jokainen optinen kuitu, jonka niputamme. Aina. Joka päivä.

Päädiagnoosilaitteidemme kestävyys on legendaarinen. Jokainen laite on vuosikymmenten tuotekehityksen, jatkuvien parannusten, valmistuksen ja oman laitoksemme sataprosenttisen laadunvalvonnan tulos. Huolehdimme siitä, että korkeat laatuodotuksemme säilyvät.

Näin varmistamme, että korkeatasoiset tuotteemme täyttävät lupauksemme tarjota tarkimmat ja varhaisimmat mahdolliset diagnoosit.

Ei enempää, ei vähempää.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Vaaramme oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman eri ilmoitusta.

01|24. A-000.00.241 FI

Markkinoija Suomessa



Mediq Suomi Oy
Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com
www.mediq.fi

