

Hei me spreijataan!

BIO-OPTICAN TUOTTEET DESINFIOINTIIN,
PUHDISTUKSEEN, JÄÄHDYTYKSEEN JA VOITELUUN




CrioClor- desinfektiospray

Chlorexydine-pohjainen spray (0,3 %) kryostaatin desinfiointiin. Minimitalausmäärä 6 x 125 ml.
Mediqin tuotenumero 1702774.



Cryo Spray jäähdytysaine

Jäähdytysaine histologisille kudoksenäytteille. Jäähdyttää nopeasti kudoksenäytteen kryostaatilla leikkaamista varten tai jäähdyttää näytettä parafiinikasetissa mikrotomilla leikkaamista varten, mikäli käytössä ei ole kylmälevyä. Suihkutetaan suoraan näytteen pinnalle. Pakkaus 12 x 150 ml.
Mediqin tuotenumero 1702570.

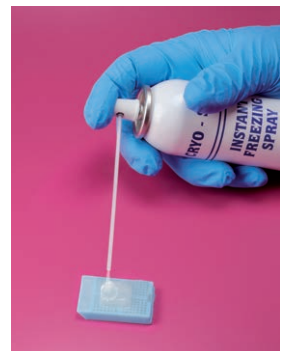

BioParaFree liuos spraypullossa

Parafiinin poistoon mikrotomeista, työskentelyalustoista ja välineistä. Hajuton. Spraypullossa, pullo ruskeaa lasia. Pakkauskoko 4 x 100 ml.
Mediqin tuotenumero 1702569.



Mikrotomiöljy

Suihkepullossa, mikrotomin osien voitelemiseen. Pakkaus 2 x 100 ml.
Mediqin tuotenumero 1702662.



Bio-fix sytologinen kiinnite

Fiksatiivi sytologisille vagina-
näytteille, spraypullossa.
Käyttö: suihkuta noin 3-4
kerrosta. Odota 7 minuuttia
kunnes suojakalvo on muo-
dostunut. Kestävä ja liukeneva
kalvo säilöö parhaiten näytteen
kunnes värjätään. Voidaan
värjätä suoraan, suositellaan
kuitenkin kalvon poistoa
tislatussa vedessä (1-2 minuuttia). Valkoinen spraypullo
PVC:tä. Koostumus: etanoli 55 %, isopropanoli 30 %,
vesiliukoisia polymeerejä 5 %, ionivaihde-
tu vesi 10 %.
IVD: In-vitro diagnostic medical device.
CND Code: W01030705, CE merkitty.
Mediqin tuotenumero 1702992.



Killik-sidosaine pikajäädytykseen

Kudosnäytteen kiinnitysaine
kryostaattileikkeille pika-
jäädytykseen. Histologisten
näytteiden valmisteluun
ennen mikroskopointia.
Väri kirkas, valikoimassa
myös sininen. Helppo
annostella puristamalla
pulloa suihkutuskohdeeseen.
Koostumus: vesiliukonen polymeeriseos, rakenne
ihanteellinen kryostaattileikkeille. Ei jätä jäämiä
näytteeseen. Liuoksen viskositeetti tukee näytettä
hyvin. Parantaa kudoksen tarttumista näytealustaan.
Pakkaus 4 x 100 ml.
Mediqin tuotenumero 1702812.



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi